

# Lischka

## CDD 1260

myjnia-dezynfektor


### ■ system mycia z dezynfekcją A0-60

CDD 1260 jest bardzo przyjaznym urządzeniem do mycia, działającym w oparciu o cyrkulację wody oraz przeprowadzającym dezynfekcję termiczną.

- podwójne ściany obudowy wykonane są ze stali nierdzewnej (1.4301), dzięki czemu urządzenie posiada izolację akustyczną i termiczną
- głęboka komora bez ostrych krawędzi, narożników i spoin
- 2 ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301)
- drzwi w systemie podwójnej ściany wyposażone w uszczelkę
- blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu - drzwi mogą zostać otwarte dopiero po zakończeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji
- system podawania wody z wbudowaną pompą spustową w każdym urządzeniu
- pompa mycia z "soft start"
- wbudowany kondensator oparów
- funkcja "powtór" dla programów P2 i P3
- 7 programów mycia



przykład możliwego załadunku

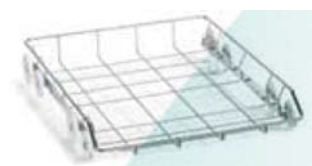

dolny kosz



górny kosz - standard



### CDD 1260

pojemność	2 kosze
parametry techniczne	400 V 3N 50 Hz / 7,0 kW 230 V 3N 50 Hz / 7,0 kW
suszenie	dostępne
wymiary	urządzenie: 600 x 600 x 850 mm urządzenie z bazą: 600 x 600 x 1250 mm

### producent

Lischka, Niemcy

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



### INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)