

Plomby plastikowe

zabezpieczenia do kontenerów

opis produktu

Plomby plastikowe stosowane są w celu odpowiedniego zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed naruszeniem lub niekontrolowanym otwarciem. Służą zagwarantowaniu prawidłowego zamknięcia od procesu sterylizacji, aż do momentu użycia narzędzi na bloku operacyjnym. Plomby wyprodukowane zostały z polipropylenu nadającego się do recyklingu. Materiał, z którego są wykonane, jest odporny na proces sterylizacji parowej, a temperatura zmiękczenia surowca wynosi powyżej 150°C. Plastikowe plomby spełniają wymagania opisane w normie EN 868-8 sekcja 4.2.3. Każde opakowanie opatrzone jest odpowiednią etykietą ze wszystkimi niezbędnymi danymi w procesie dokumentacji.


sposób użycia

Przed użyciem zawartości kontenera należy sprawdzić czy plastikowa plomba jest nienaruszona; w przeciwnym wypadku należy oddać kontener do ponownej sterylizacji.

obszar zastosowań

Kontenery różnego typu:

NIEBIESKI	nr kat. 559P	kontenery typu Aesculap
ZIELONY	nr kat. 559W	kontenery typu Wagner
CZERWONY	nr kat. K2-665	uniwersalne

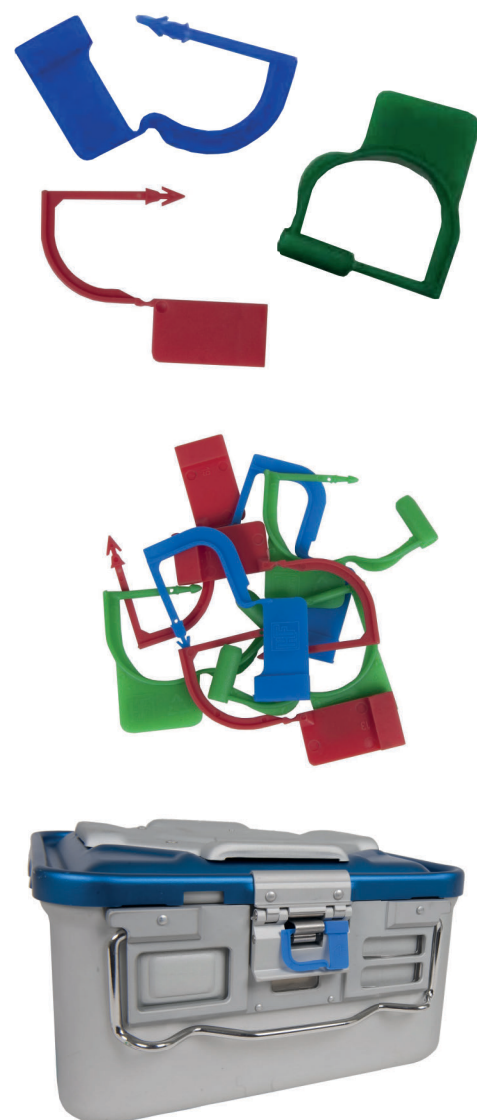

normy

EN 868-8 sekcja 4.2.3
EN 980
EN 285

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

NIEBIESKI - 559P:
1000 szt. w opakowaniu
ZIELONY - 559W:
500 szt. w opakowaniu
CZERWONY - K2-665:
100 szt. w opakowaniu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu