

Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji płaskie i z zakładką

opis produktu

Jednorazowe opakowania w formie rękawów z zakładkami i płaskich, pozwalające na bezpieczną sterylizację oraz przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów, typów i przeznaczenia. Rękawy STERIM® składają się z dwóch warstw: papierowej i foliowej, połączonych 3-kanalowym termo zgrzewem, który cechuje się wyjątkową wytrzymałością oraz gwarantuje bezpieczne i łatwe, bezpyłowe otwieranie. Gramatura specjalnego papieru medycznego wynosi 60 - 70 g/m² i została precyzyjnie dobrana zapewniając bardzo wysoką wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie.

Powierzchnia foliowa koloru zielonego wykonana jest z nowego 6-warstwowego MULTI kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu o grubości 52µm. Ulepszony kompozyt foliowy posiada właściwości zapewniające wysoką jakość zgrzewu z powierzchnią papierową oraz dużą elastyczność i trwałość. Na rolkach papierowo-foliowych nadrukowane są wskaźniki chemiczne typu 1 sterylizacji STEAM, EO i FORM. Podstawowe informacje techniczne wymagane przez normy umieszczone są w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wszystkie napisy, wskaźniki oraz informacja o kierunku otwierania zostały umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, aby wyeliminować ryzyko skażenia tuszem lub zabrudzenia rozmytym wskaźnikiem. Dodatkowo umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji mają ułatwić personelowi rozróżnienie pakietów sterylizowanych od niesterylizowanych. Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 150-200°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia zgrzewającego. Każda rolka rękawa STERIM® jest zabezpieczona specjalną folią i posiada etykietę identyfikacyjną, na której umieszczona jest m. in. informacja o numerze serii, dacie produkcji i przydatności oraz znak CE. Rękawy zbiorczo zapakowane są w specjalny karton papierowy, oznaczony etykietą identyfikacyjną.

obszary zastosowań

Sterylnizatory parowe, formaldehydowe i tlenkiem etylenu różnych rozmiarów i typów spełniających odpowiednie normy.




normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1 PN EN 868 -2-3-5 ISO 9001 Dyrektywa CE 93/42 Typ 1 wyrób medyczny niesterylny, CE	Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Numer serii umieszczony na rękawie.

Rękawy papierowo-foliowe

do sterylizacji płaskie i z zakładką

■ rękaw do sterylizacji płaski

RSP050	50mm x 200m	12 rolek w kartonie
RSP075	75mm x 200m	8 rolek w kartonie
RSP100	100mm x 200m	6 rolek w kartonie
RSP120	120mm x 200m	4 rolki w kartonie
RSP150	150mm x 200m	4 rolki w kartonie
RSP200	200mm x 200m	2 rolki w kartonie
RSP250	250mm x 200m	2 rolki w kartonie
RSP300	300mm x 200m	2 rolki w kartonie
RSP350	350mm x 200m	2 rolki w kartonie
RSP380*	380mm x 200m	2 rolki w kartonie
RSP400	400mm x 200m	2 rolki w kartonie
RSP420*	420mm x 200m	2 rolki w kartonie

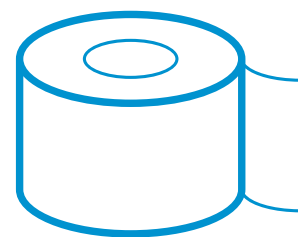

■ rękaw do sterylizacji z zakładką

RSF075	75mm x 30mm x 100m	8 rolek w kartonie
RSF100	100mm x 40mm x 100m	6 rolek w kartonie
RSF150	150mm x 50mm x 100m	4 rolki w kartonie
RSF200	200mm x 50mm x 100m	2 rolki w kartonie
RSF250	250mm x 60mm x 100m	2 rolki w kartonie
RSF300	300mm x 60mm x 100m	2 rolki w kartonie
RSF350	350mm x 80mm x 100m	2 rolki w kartonie
RSF380*	380mm x 80mm x 100m	2 rolki w kartonie
RSF400	400mm x 80mm x 100m	2 rolki w kartonie
RSF420*	420mm x 80mm x 100m	2 rolki w kartonie



* produkty dostępne na specjalne zamówienie

Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w myśl prawa handlowego.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu