

System bariery sterylnej włóknina sterylizacyjna SMS

opis produktu

Jednorazowe opakowanie ze specjalnej, 3-warstwowej, miękkiej włókniny nowej generacji o gramaturze 47g/m² lub 55g/m² pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Włóknina przeznaczona jest do sterylizacji parowej, plazmowej lub tlenkiem etylenu małych, średnich i dużych zestawów. Surowce użyte do produkcji włókniny charakteryzują się doskonałą przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączoną z wysoką barierowością bakteriologiczną (przy podwójnym pakowaniu). Włóknina SMS cechuje się dużą miękkością i łatwością w układaniu. Produkt oferowany jest w kolorze niebieskim i zielonym. Nie zawiera lateksu.

sposób użycia



Należy zapakować wybrany zestaw narzędziowy, bielizniany lub inny, w dwie warstwy włókniny o różnych kolorach, zgodnie z przyjętymi zasadami zawijania. Gotowy pakiet zaleca się zabezpieczyć dodatkowo taśmą samoklejącą. Następnie należy przeprowadzić proces sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe (STEAM) i gazowe (EO, PLASMA) różnego typu.

wytwórca

INFORMER MED/ Polska

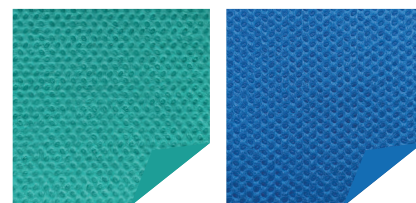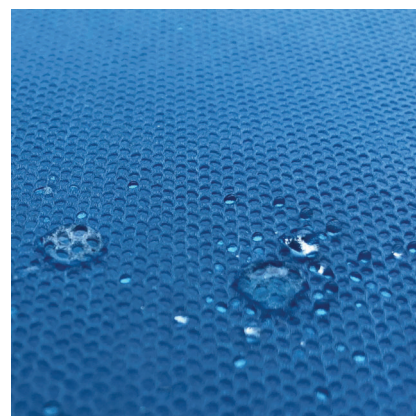

zielony

niebieski

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1:2006, EN 868 Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna EN ISO 9001	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Na produkcie umieszczony numer serii odpowiadający numerowi na opak. zbiorczym i dacie produkcji.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



wytwórca:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19


e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu


System bariery sterylnej

włóknina sterylizacyjna SMS - instrukcja

■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 1:

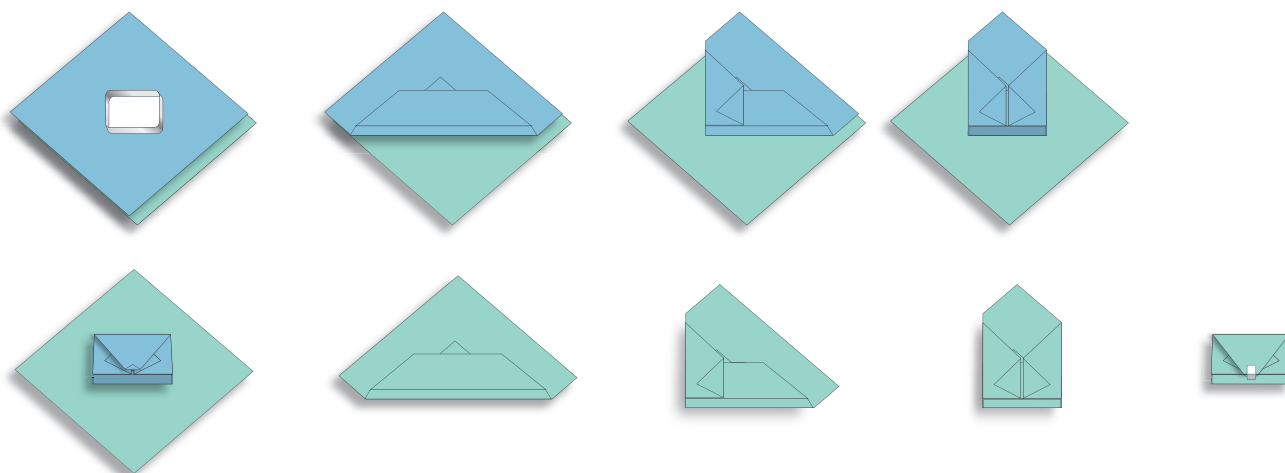

■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 2:

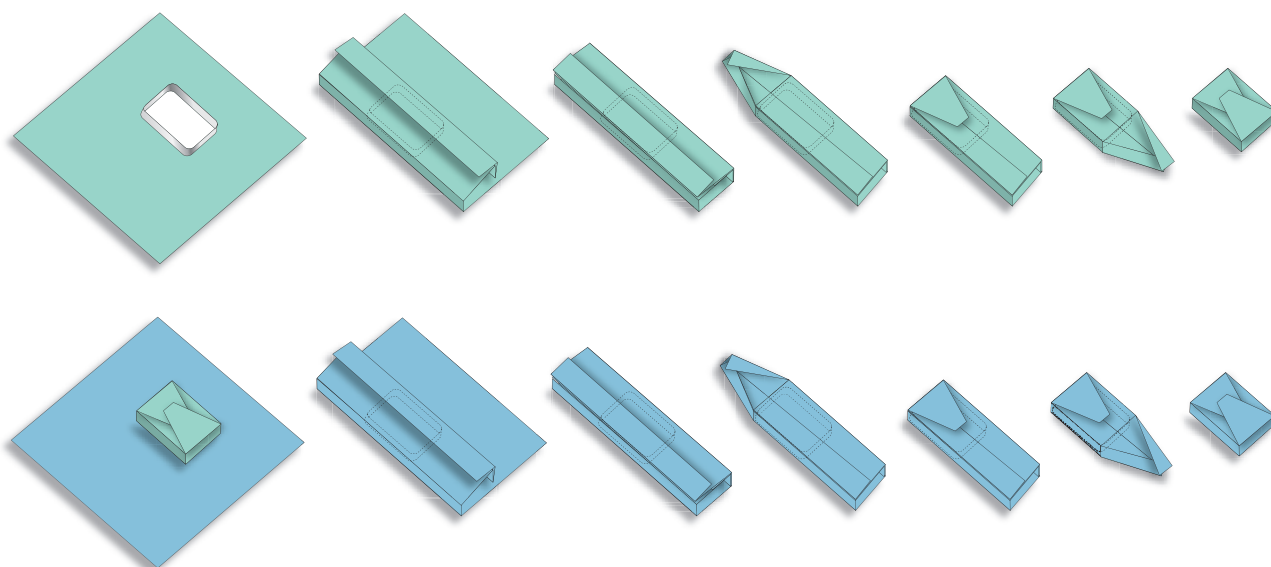

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



wytwórca:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu

STERIM®

System bariery sterylnej

włóknina sterylizacyjna SMS - rozmiary

■ zielona włóknina sterylizacyjna SMS

SMS7575Z	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS9090Z	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS1010Z	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS1212Z	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu

■ niebieska włóknina sterylizacyjna SMS

SMS7575N	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS9090N	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS1010N	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
SMS1212N	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



wytwórca:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu