

POUCHMAKER

urządzenie do automatycznego cięcia i zgrzewania torebek

opis produktu

Pouchmaker to urządzenie zgrzewające, które stanowi połączenie podajnika rolkowego i obrotowego. Jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, w których występuje potrzeba wyprodukowania torebek papierowo-foliowych w krótkim czasie. Gdy tradycyjne urządzenia obecnie dostępne na rynku mogą wyprodukować 10 torebek na minutę, Pouchmaker może osiągnąć wysoką wydajność do 4000 torebek na godzinę.

Po wprowadzeniu oczekiwanych parametrów na panelu, urządzenie Pouchmaker produkować będzie automatycznie gotowe torebki sterylizacyjne o wymaganej długości i w żądanej ilości.

System zgrzewający Pouchmaker może być również stosowany jako tradycyjna zgrzewarka rolkowa lub maszyna tnąca, która pozwala na przygotowanie torebek o długości od 50 mm do 1000 mm.

Szerokość zgrzewu 40cm umożliwia stosowanie jednocześnie kilku rękawów o różnych rozmiarach.

Funkcja regulacji prędkości zgrzewania pomaga zarządzać produkcją dużych ilości torebek bez utraty jakości zgrzewu.

korzyści

Dzięki urządzeniu Pouchmaker można łatwo określić swoje potrzeby, szybko rozpocząć pracę i zwiększyć wydajność produkcji. Możliwość samodzielnego przygotowania torebek o dowolnych rozmiarach w krótkim czasie, pozwala na znaczącą redukcję kosztów w funkcjonowaniu centralnej sterylizatorni.

dane techniczne

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 845 x 260 x 210 mm

Waga: 38 kg

Prędkość podawania: 15m/min

Temp. zgrzewania: max.250°C, +/- 1°C


Siła zgrzewania: 100N

Zasilanie: 230V, 50/60 Hz; moc: 600W

Odległość zgrzewania od krawędzi: 5-30 mm

Szerokość zgrzewu: 14 mm

Obudowa: stal nierdzewna, szlifowana ASI 304

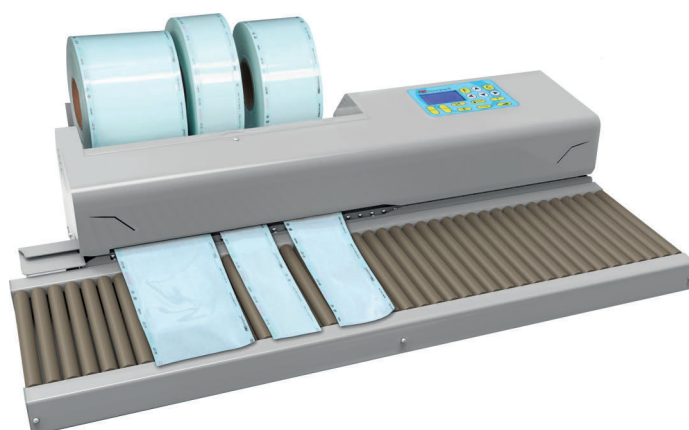

normy

EN 60204-1:2006
EN 614-1:2006+A1:2009
ISO 121100:2010
DIN 58953-7:2008

obszar zastosowań

centralne sterylizatornie
odbiorcy przemysłowi

numer katalogowy

PM101 - zgrzewarka Pouchmaker
PMR - podajnik rolkowy