

# View Pack®


## System bariery sterylnej opakowania do sterylizacji materiałów medycznych

### opis produktu

Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalają na bezpieczną sterylizację oraz przechowywanie materiałów medycznych. Występują w formie rękawów, torebek zgrzewalnych oraz samoklejących. Opakowania View Pack® składają się z dwóch warstw: papierowej i foliowej, połączonych 3-kanalowym termo zgrzewem, który cechuje się wyjątkową wytrzymałością oraz gwarantuje bezpieczne i łatwe, bezpytowe otwieranie. Gramatura specjalnego papieru medycznego wynosi 60 g/m<sup>2</sup> i została precyzyjnie dobrana zapewniając bardzo wysoką wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu o grubości 52µm. Ulepszony kompozyt foliowy posiada właściwości zapewniające wysoką jakość zgrzewu z powierzchnią papierową oraz dużą elastyczność i trwałość. Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM Typ 1. Wskaźniki zmieniają kolory w zależności od tego, jakiemu procesowi sterylizującemu poddaje się zawartość opakowania. Dzięki temu łatwo stwierdzić, czy opakowanie oraz jego zawartość poddano procesowi sterylizacji. Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 160-200°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia zgrzewającego. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Specjalne ułożenie włókien papieru gwarantuje łatwość otwierania poprzez odklejanie oraz dużą wytrzymałość mechaniczną na cięciu i przebijaniu. Dzięki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne dla mikroorganizmów stanowiąc doskonałą barierę dla bakterii. View Pack® daje możliwość samodzielnego przygotowania pakietów o dowolnych rozmiarach. Wszystkie napisy, wskaźniki oraz informacja o kierunku otwierania zostały umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, aby wyeliminować ryzyko skażenia tuszem lub zabrudzenia rozmytym wskaźnikiem.

### obszary zastosowań

W sterylizatorach parowych, formaldehydowych oraz na tlenek etylenu.

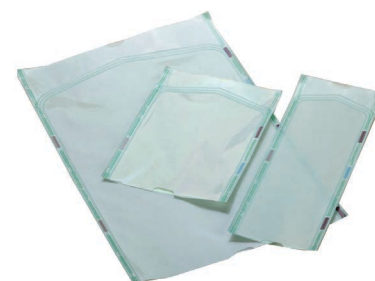

### normy

ISO 11607-1  
PN EN 868 -2-3-4-5  
BS 6871-1987  
Dyrektywa CE 93/42  
DIN 58.953-4

### przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, zdala od źródeł światła, w temperaturze poniżej 30°C. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Numer serii odpowiada numerowi na opakowaniu zbiorczym.

# View Pack®

## System bariery sterylnej opakowania do sterylizacji materiałów medycznych

### ■ rękawy papierowo-foliowe View Pack®- rolki bez zakładki:

nr kat. 102AMC5020	5cm x 200m	6 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC7520	7,5cm x 200m	4 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC1020	10cm x 200m	4 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC1220	12cm x 200m	4 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC1520	15cm x 200m	4 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC2120	21cm x 200m	2 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC2520	25cm x 200m	2 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC3020	30cm x 200m	2 szt. w kartonie
nr kat. 102AMC4020	40cm x 200m	1 szt. w kartonie

### ■ rękawy papierowo-foliowe View Pack®- rolki z zakładką:

nr kat. 104AMC7510	7,5cm x 3cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 104AMC1010	10cm x 4cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 104AMC1510	15cm x 5cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 104AMC2010	20cm x 5cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 104AMC2510	25cm x 6cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 104AMC3010	30cm x 6cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 104AMC4010	40cm x 8cm x 100m	1 szt. w kartonie

### ■ torebki papierowo-foliowe zgrzewalne View Pack®- torebki bez zakładki:

nr kat. 101AMC0525	50mm x 250mm	2000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC7515	75mm x 150mm	2000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC7520	75mm x 200mm	2000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC7525	75mm x 250mm	2000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC7527	75mm x 270mm	2000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC7530	75mm x 300mm	2000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC7558	75mm x 580mm	1500 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1020	100mm x 200mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1025	100mm x 250mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1027	100mm x 270mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1030	100mm x 300mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1040	100mm x 400mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1042	100mm x 420mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1240	120mm x 400mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1520	150mm x 200mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1527	150mm x 270mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1532	150mm x 320mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC1538	150mm x 380mm	1000 szt. w kartonie

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)

# View Pack®

## System bariery sterylnej opakowania do sterylizacji materiałów medycznych

### ■ torebki papierowo-foliowe zgrzewalne View Pack®- torebki bez zakładki:

nr kat. 101AMC1622	160mm x 220mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC2128	210mm x 280mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC2135	210mm x 350mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC2142	210mm x 420mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC2538	250mm x 380mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC2542	250mm x 420mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. u101AMC2550	250mm x 500mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC2735	270mm x 350mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC2745	270mm x 450mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC3038	300mm x 380mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC3042	300mm x 420mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC3050	300mm x 500mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC3250	320mm x 500mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 101AMC4260	420mm x 600mm	500 szt. w kartonie

### ■ torebki papierowo-foliowe zgrzewalne View Pack®- torebki z zakładką:

nr kat. 103AMC1030	100mm x 40mm x 300mm	4 szt. w kartonie
nr kat. 103AMC1037	100mm x 40mm x 370mm	4 szt. w kartonie
nr kat. 103AMC1538	150mm x 50mm x 380mm	4 szt. w kartonie
nr kat. 103AMC2040	200mm x 50mm x 400mm	2 szt. w kartonie
nr kat. 103AMC2048	200mm x 50mm x 480mm	2 szt. w kartonie
nr kat. 103AMC3055	300mm x 60mm x 550mm	1 szt. w kartonie

### ■ torebki papierowo-foliowe zgrzewalne View Pack®- torebki samoklejące:

nr kat. AAAMC90133	90mm x 133mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC90203	90mm x 203mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC90230	90mm x 230mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC90559	90mm x 560mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC13254	130mm x 250mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC13356	130mm x 356mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC20330	200mm x 330mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC30390	300mm x 390mm	200 szt. w kartonie
nr kat. AAAMC30450	300mm x 450mm	200 szt. w kartonie

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)